

試薬管理システム 説明書

Ver. 4.1.0 操作説明

～～ 目次 ～～

項	内容
2	改訂履歴
3	試薬管理システム・概要
4	注文登録
6	発注処理
8	入庫処理
11	出庫処理
12	【補足】「同時使用数」設定について
14	出庫一覧
15	【補足】包装の内訳を個別に管理した場合の画面表示
16	コメント編集
17	履歴・一覧・管理画面
19	【補足】入庫ミスした試薬について
20	【補足】試薬の廃棄方法について
21	【補足】操作担当者名表示
22	【補足】2台の分析装置で同一の試薬を使用する場合
23	【補足】入庫一覧・出庫一覧 承認処理
25	【補足】調整試薬管理について
27	【補足】使用量管理機能について

R&Will

アールアンドウィル株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-4-1 エムワンビル4階

電話: 03-3665-2920 FAX: 03-5643-2885

<http://www.randwill.co.jp/>

改訂履歴

版数	日付	変更内容
1.0.0	2020/11/03	説明書 初版作成
1.0.1	2021/05/03	項追加（概要、マスター一覧、試薬マスター画面）
2.0.0	2021/08/19	機能追加による改訂 ・注文登録画面 添付文書リンク追加 ・LotNo 管理画面 LotNo 変更試薬への注意表示 ・出庫処理画面 注文対象試薬の自動注文処理を確認
3.0.0	2022/12/06	機能追加による改訂 ・入庫情報修正機能 ・同一試薬複数出庫 ・在庫欠品表示
4.0.0	2024/01/19	発注処理関係特殊処理
4.0.9	2025/01/20	機能追加による改訂 ・使用期限必須指定 ・出庫処理画面に個別在庫情報表示 説明書分割 操作説明（マスター画面以外）
4.0.10	2025/02/05	入庫一覧、出庫一覧 承認操作
4.0.11	2025/02/16	同時使用数設定による出庫処理変更
4.0.12	2025/02/28	調整試薬管理
4.0.13	2025/04/08	入庫、出庫 LotNo 照合無効設定
4.0.14-16	2025/04/28	不具合修正
4.0.17	2025/06/12	出庫一覧 使用者情報表示
4.0.18	2025/06/20	出庫一覧 使用日検索機能追加
4.0.19-20	2025/07/04	入庫画面、出庫画面 カーソル移動修正
4.0.21	2025/07/18	出庫一覧 抽出状態で使用情報編集可能に
4.1.0	2025/07/09	使用量管理機能追加

試薬管理システム・概要



注文登録

バーコード読込、管理 ID 入力、リスト選択から注文する試薬を登録します。

※現在注文中であれば、追加注文であるか確認メッセージを表示します。
規定在庫数を下回った試薬は、別枠に「要発注試薬」として表示されます。

発注処理

注文登録している試薬を発注書に印刷します。

注文履歴

指定期間の試薬の注文履歴を照会・印字します。

入庫処理

バーコード読込、またはリスト選択により納品された試薬をシステムに登録します。

※登録された試薬には、使用単位で「管理ラベル（バーコード付）」を貼付します。

入庫一覧

指定期間の試薬の入庫履歴を照会・印刷します。

出庫処理

GS1-128 バーコード、または「管理ラベル」を読み込ますことで出庫します。

※出庫処理後、残りの在庫が規定数以下、または在庫がなくなると、注文を促します。

出庫一覧

指定期間の試薬の出庫履歴を照会・印刷します。

使用開始日、使用終了日、使用状況を任意に変更できます。

棚卸処理

指定期間の入出庫及び現在の在庫を照会・印刷します。購入金額の集計も行います。

在庫一覧

現時点の入庫数、在庫数、残りの内訳、及び使用期限を照会・印字します。

使用期限管理

使用期限が切れた試薬、使用期限まで残日数が少なくなった試薬を検索します。

LotNo 管理

指定期間内に入庫した試薬で、LotNo の変更があった試薬を検索します。

コメント編集

入庫した試薬にコメントを記録します。

注文登録① … 試薬の注文を登録します。

試薬の指定方法 ※バーコードを読み込ます際は「注文試薬」欄にカーソルがあることを確認

以下のいずれかの方法で試薬を指定します。

- ① 試薬の包装にある GS1-128 等の「バーコード」を読み込む
- ② 試薬管理システムで印字した「管理ラベル」の「バーコード」を読み込む
- ③ 「注文試薬」欄に 6 桁の「管理 ID」を入力する ※「管理 ID」はシステムの試薬別コード
- ④ 画面左の「試薬検索」から対象試薬を選択する

注文日: 2025年 1月24日 (金)

注文試薬: (管理ID、バーコード読み)

注文試薬一覧 (注文数が赤色は発注済み)

コメント欄表示

試薬検索

名称検索:

業者指定: --未指定--

部門指定: 免疫化学

ガイド指定: --未指定--

管理ID	P	試薬名称
104960		ルミバリスプレスト 基質液
104970		ルミバリスプレスト 洗浄液
104980		ルミバリスプレスト フロー用濃縮洗剤
104990		ルミバリスプレスト 検体希釈液
105010		ルミバリスプレスト キュベット
105030		ルミバリスプレスト ソーダライム
105100		ACCURUNB600
105141		ACCURUN810陰性コントロール
105500		β-グルカナーゼ 前処理液 トキシMT-6
105580		キャピラリーキャップ(血ガス)
105570		マルチキャピラリー (血ガス)
105580		オズモ標準液セット
105640		β-グルカナーゼトキシンMT-6500
105670		アミド酸 甲種 トキシンMT-6500

戻る (ESC)

「P」列 … 添付文書が保管されている場合、アイコンが表示されます。

長期一括注文 短期一括注文 未登録 試薬消去

注文登録(F12)

※指定した試薬が「注文済・未納」の場合、追加を確認するメッセージが表示されます。

注文数の修正

「修正数」欄に、追加数 (注文数を減らす場合、マイナス値) を登録します。

注文日: 2025年 1月24日 (金)

注文試薬: (管理ID、バーコード読み)

注文試薬一覧 (注文数が赤色は発注済み)

コメント欄表示

No.	管理ID	試薬名称	業者	部門	注文数	修正数	コメント
未	100850	メイグリンクルド染色液(SMS-800)	カニシタサイ...	血液・凝固	3	-1	
未	100870	リネン酸パツア(SPB-300)	カニシタサイ...	血液・凝固	1	1	
未	105940	オーレノパロナル 緩衝液 CA6000	カニシタサイ...	血液・凝固	1	0	

登録後、[注文登録]ボタンをクリックします。

※必要に応じて「コメント(注文)」を登録可能

注文登録②

規定在庫不足試薬の注文

試薬マスターにて「注文目安在庫数」等を登録した試薬の在庫が、指定した数を下回ると「要発注試薬」欄に表示されます。

注文日: 2025年 1月24日 (金)

注文試薬: (管理ID、バーコード読み込み)

注文試薬一覧 (注文数が青色は発注済み)

コメント欄表示

試薬検索

名称検索:

業者指定: --未指定--

部門指定: 微生物

ガイド指定: --未指定--

管理ID	P	試薬名称
100030		センデイスク CEC30
100040		センデイスク CFT30
100050		センデイスク PIP100
100060		センデイスク P10
100070		センデイスク M30
100080		センデイスク ATM30
100090		センデイスク CLR15
100100		センデイスク FEP30
100130		センデイスク MEM10
100140		センデイスク SXT
100150		センデイスク CDN5
100160		センデイスク LVX5
100170		センデイスク OX1

要発注試薬 (規定在庫不足・未発注)

管理ID	試薬名称	業者	規格容量	発注目安	在庫数
100030	センデイスク CEC30	(株)エー・エル・ス	50枚	1	0
100040	センデイスク CFT30	(株)エー・エル・ス	50枚	1	0
100050	センデイスク PIP100	(株)エー・エル・ス	50枚	1	0
100060	センデイスク P10	(株)エー・エル・ス	50枚	1	0

戻る (ESC) 「P」列 ...添付文書が保管されている場合、アイコンが表示されます。

長期一括注文 短期一括注文 未登録 試薬消去 注文登録(F12)

該当試薬をクリックすることで、「注文試薬一覧」に追加されます。

注文日: 2025年 1月24日 (金)

注文試薬: (管理ID、バーコード読み込み)

注文試薬一覧 (注文数が青色は発注済み)

コメント欄表示

試薬検索

名称検索:

業者指定: --未指定--

部門指定: 微生物

ガイド指定: --未指定--

管理ID	P	試薬名称
100030		センデイスク CEC30
100040		センデイスク CFT30
100050		センデイスク PIP100
100060		センデイスク P10
100070		センデイスク M30
100080		センデイスク ATM30
100090		センデイスク CLR15
100100		センデイスク FEP30
100130		センデイスク MEM10
100140		センデイスク SXT
100150		センデイスク CDN5
100160		センデイスク LVX5
100170		センデイスク OX1

要発注試薬 (規定在庫不足・未発注)

管理ID	試薬名称	業者	規格容量	発注目安	在庫数
100030	センデイスク CEC30	(株)エー・エル・ス	50枚	1	0
100040	センデイスク CFT30	(株)エー・エル・ス	50枚	1	0
100050	センデイスク PIP100	(株)エー・エル・ス	50枚	1	0
100060	センデイスク P10	(株)エー・エル・ス	50枚	1	0

戻る (ESC) 「P」列 ...添付文書が保管されている場合、アイコンが表示されます。

長期一括注文 短期一括注文 未登録 試薬消去 注文登録(F12)

発注処理①

「物品システム」向けに注文した試薬を一覧として印刷します。

一覧表に印刷したい試薬を選択(反転)して「発注処理(F12)」をクリックしてください。

※「Shift キー+ドラック」、「Ctrl キー+クリック」、または「右クリック」で任意に対象試薬を指定できます。

発注処理

表示条件: 業者: --未指定-- 部門: --未指定-- ガイド: --未指定-- ☒ 未発注のみ

発注日: 2025年 1月25日 (土)

注文日	No	管理ID	試薬名称	業者	部門	発注数	発注日	コメント
2025/01/25	5	101730	CA クリーン 1 CA6000	ガリニライフサイ...	血液・凝固	8		
2025/01/25	6	101920	エステラーゼ染色キット	ガリニライフサイ...	血液・凝固	1		
2025/01/25	7	101940	メイグリュフルト染色液	ガリニライフサイ...	血液・凝固	4		
2025/01/25	1	103310	補体価コントロール血清セット	広島和光(株)	生化学	10		
2025/01/25	2	103600	コレステストNキャリブレーター	(株)エーハス	生化学	1		
2025/01/25	3	104040	Mb-ラテックスCN「生研」R1/R2	(株)中村岡山...	生化学	5		
2025/01/25	4	104230	補体価-HAテストワー	広島和光(株)	生化学	5		

※発注取消は、「未発注のみ」表示状態を解除し、発注日をクリック

☒ 部門順

試薬名称を選択(反転表示)させた場合、指定した試薬のみ発注処理されます。試薬の選択は、クリック(+ Shift or +Ctrl)、または右クリックしてください。

戻る (ESC) 発注処理(F12)

※卸業者別に発注書を印刷する場合、卸業者別のボタンを用意します。

ボタン背景が「ピンク色」の場合、注文試薬があります。無い場合は、「グレー色」となります。

※発注取消は、「未発注のみ」表示状態を解除し、発注日をクリック

戻る (ESC) E (F1) K (F2) S (F3) T (F4) H (F5) 発注処理(F12)

印刷された発注書（見本）

発注書

発注日 2025年 01月 25日

病院 中央検査部

TEL: FAX:

物品コード	商品名	規格	数量	備考
2023 生化学 4003310	補体価コントロール血清セット	410-43701 1mL用x2x2種	10	
2023 生化学 4003600	コレステストNキャリブレーター	289941 2mL用*3(30回)	1	
2023 生化学 4004040	Mb-ラテックスCN「生研」R1/R2	605368 18mL*2/6mL*2	5	
2023 生化学 4004230	補体価-HAテストワー	418-85001 セット**R1:リボソー	5	

「物品コード」欄 上段「部門コード 部門名」 下段「(卸業者) 注文コード」となります。

発注処理②

発注の取消方法

①発注処理を行った「発注日」を指定し、「未発注分のみ」のチェックを外します。

注文日	No	管理ID	試薬名称	業者	部門	発注数	発注日	コメント
2025/01/25	1	103310	補体価コントロール血清セット	広島和光(株)	生化学	10	2025/01/25	
2025/01/25	2	103600	コレステロNキッアレーター	(株)エパルス	生化学	1	2025/01/25	
2025/01/25	3	104040	Mb-ラテックスCN「生研」R1/R2	(株)中村山	生化学	5	2025/01/25	
2025/01/25	4	104230	補体価-HAテストコー	広島和光(株)	生化学	5	2025/01/25	

②発注を取り消したい試薬の「注文日」をクリックすると、メッセージが表示されます。

No: 3 Mb-ラテックスCN「生研」R1/R2
の発注を取り消してよろしいですか。

はい(Y) いいえ(N)

③処理後、取消後の内容が再表示されます。

注文日	No	管理ID	試薬名称	業者	部門	発注数	発注日	コメント
2025/01/25	1	103310	補体価コントロール血清セット	広島和光(株)	生化学	10	2025/01/25	
2025/01/25	2	103600	コレステロNキッアレーター	(株)エパルス	生化学	1	2025/01/25	
2025/01/25	4	104230	補体価-HAテストコー	広島和光(株)	生化学	5	2025/01/25	

④必要に応じて[発注処理]ボタンを操作して発注書を再印刷します。

入庫処理①

※注文されていない試薬を入庫しようとする、「事後発注」とするか確認メッセージが表示されます。

「はい」を選択すると、注文・発注が実施されていたように記録されます。

方法 以下の①～③のいずれかの操作後、[入庫登録]ボタンをクリックします。

①バーコード読み

「入庫試薬」欄にカーソルがある状態で、試薬のバーコードを読み込ませます。

No	管理ID	試薬名称	使用期限	LotNo	規格容量	業者	コメント
未	103600	コリステストキャブアレーター	2027/01/25	123456	2ml用*3(30回)	(株)パルス	

②注文履歴参照

「発注済・未入庫」タブから試薬を指定して[試薬選択]ボタンをクリックします。

注文日	No	管理ID	試薬名称	業者	部門	発注数	発注日	コメント
2025/01/15	1	102960	東洋pH調整液(LINEV)	ガコニワサイ...	一般	3	2025/01/15	
2025/01/25	1	103310	補体価エロール血清セット	広島和光株...	生化学	10	2025/01/25	
2025/01/25	2	103600	コリステストキャブアレーター	(株)パルス	生化学	1	2025/01/25	
2025/01/25	4	104230	補体価-HAテストフロー	広島和光株...	生化学	5	2025/01/25	

「使用期限」と「LotNo」を手入力して[試薬選択]をクリックします。

※「使用期限」は、初期値の「2年後」または「手入力必須」指定となります。

③直接指定 (バーコードが無い試薬の場合)


「試薬検索」から該当試薬を指定して「使用期限」と「LotNo」を手入力し[試薬選択]をクリックします。

※「使用期限」は、初期値の「2年後」または「手入力必須」指定となります。

入庫処理②

複数発注試薬の一括入庫

発注処理で複数個発注した場合、同一 Lot の一括入力を行うか確認メッセージが表示されます。

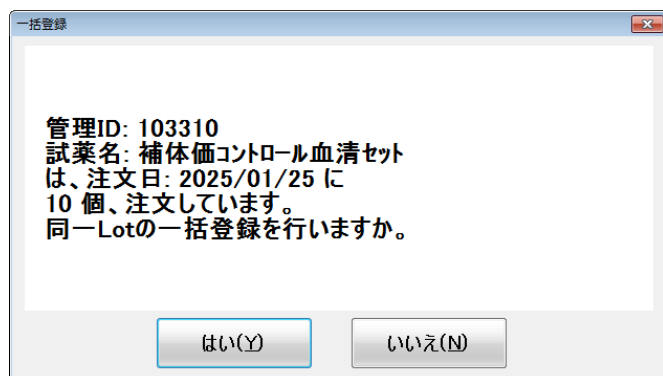

一括登録

管理ID: 103310
試薬名: 補体価コントロール血清セット
は、注文日: 2025/01/25 に
10 個、注文しています。
同一Lotの一括登録を行いますか。

はい(Y) いいえ(N)

数量※を指定して[一括個数設定]をクリックします。 ※【補足】 参照



選択入庫

試薬情報

管理ID 103310
試薬名 補体価コントロール血清セット
品番 410-43701
規格容量 1mL用×2×2種
使用期限 2027/01/25
LotNo 123

一括入庫個数

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40

「使用期限」と「LotNo」が同じ試薬が確認してください。
40個を超える場合は2回に分けて登録してください。

キャンセル 一括個数設定



入庫処理

入庫日 2025年 1月25日 (土) 入庫試薬 (バコード読み)

表示条件 入庫登録済み表示

入庫試薬一覧 (発注済・未入庫)

No	管理ID	試薬名称	使用期限	LotNo	規格容量	業者	コメント
未	103310	補体価コントロール血清セット	2027/01/25	123	1mL用×2×2種	広島和光(株)岡...	
未	103310	補体価コントロール血清セット	2027/01/25	123	1mL用×2×2種	広島和光(株)岡...	
未	103310	補体価コントロール血清セット	2027/01/25	123	1mL用×2×2種	広島和光(株)岡...	
未	103310	補体価コントロール血清セット	2027/01/25	123	1mL用×2×2種	広島和光(株)岡...	
未	103310	補体価コントロール血清セット	2027/01/25	123	1mL用×2×2種	広島和光(株)岡...	
未	103310	補体価コントロール血清セット	2027/01/25	123	1mL用×2×2種	広島和光(株)岡...	
未	103310	補体価コントロール血清セット	2027/01/25	123	1mL用×2×2種	広島和光(株)岡...	
未	103310	補体価コントロール血清セット	2027/01/25	123	1mL用×2×2種	広島和光(株)岡...	
未	103310	補体価コントロール血清セット	2027/01/25	123	1mL用×2×2種	広島和光(株)岡...	
未	103310	補体価コントロール血清セット	2027/01/25	123	1mL用×2×2種	広島和光(株)岡...	

【補足】

「LotNo」 が異なる複数の試薬を入庫する場合、「LotNo」 毎に入庫する数量を調整して
[一括個数設定]を実施します。

入庫処理③

入庫の取消

- ①誤って入庫した試薬を取り消す場合、「入庫登録済み表示」のチェックを入れ、該当試薬を入庫した「入庫日」に変更します。

No	管理ID	試薬名称	使用期限	LotNo	規格容量	業者	コメント
1	103600	コレステストNキャリブレーター	2027/01/25	123	2ml用*3(30回)	(株)Eハルス	

- ②該当試薬の「No」をクリックします。

No	管理ID	試薬名称	使用期限	LotNo	規格容量	業者	コメント
1	103600	コレステストNキャリブレーター	2027/01/25	123	2ml用*3(30回)	(株)Eハルス	

- ③確認メッセージが表示されますので、[はい(Y)]をクリックします。

No: 1 コレステストNキャリブレーター
を削除してよろしいですか。

はい(Y) いいえ(N)

【注意事項】

- ※ 入庫登録した試薬を取消(削除)した場合、その「No」は欠番となります。
取消後、再度入庫し直した場合、次の「No」が割り振られます。

例) 上記削除処理後、入庫し直した場合

No	管理ID	試薬名称	使用期限	LotNo	規格容量	業者	コメント
2	003600	コレステストNキャリブレーター	2027/01/25	124	2ml用*3(30回)	(株)Eハルス	

- ※ 「No」は、試薬・入庫日毎に「1」から割り振られます。


出庫処理①

※「出庫試薬」欄にカーソルがあることを確認して、以下の①～③の方法で出庫します。

- ① 試薬の包装にある GS1-128 等の「バーコード」を読み込む
- ② 試薬管理システムで印字した「管理ラベル」の「バーコード」を読み込む
- ③ 「注文試薬」欄に 6 桁の「管理 ID」を入力する ※「管理 ID」はシステムの試薬別コード

上記①～③の操作にて、対象試薬を指定した際、次の出庫分の LotNo が異なると、以下のメッセージが表示されます。

異なる LotNo を出庫する場合

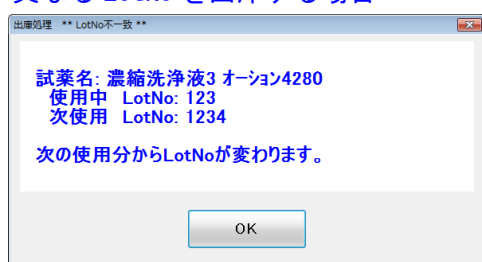

指定した試薬の在庫状況が上段に表示されます。下段に出庫処理対象が表示されます。

指定試薬在庫状況										
管理ID	試薬名称	入庫日	使用期限	LotNo	入庫	在庫	内訳	未納	部門	規格容量
103230	ビリアルピッキングアレータ	2025/01/23	2027/01/25	1234	1	1	4		生化学	3mL用x4

出庫試薬一覧										
出庫日	管理ID	包装	使用	試薬名称	入庫日	使用期限	LotNo	使用開始	使用終了	残在庫
替	103230	01	01	ビリアルピッキングアレータ	2025/01/23	2027/01/25	1234			

1 件(または複数)の出庫対象を表示後、[出庫処理]ボタンをクリックします。

指定試薬在庫状況										
管理ID	試薬名称	入庫日	使用期限	LotNo	入庫	在庫	内訳	未納	部門	規格容量
104970	ルミバリスプレスト 洗浄液	2025/01/07	2027/01/25	123ABC	2	2			免疫化学	4000mL×1

出庫試薬一覧										
出庫日	管理ID	包装	使用	試薬名称	入庫日	使用期限	LotNo	使用開始	使用終了	残在庫
替	103230	01	01	ビリアルピッキングアレータ	2025/01/23	2027/01/25	1234			
未	104970	01		ルミバリスプレスト 洗浄液	2025/01/07	2027/01/25	123ABC			

戻る (ESC)
出庫処理(F12)

※「出庫日」が「未」「替」の場合、未だ出庫対象候補の状態では出庫は実施されていません。

「未」… 「同時使用数」指定済み、 「替」… 使用終了指定（旧機能）

出庫処理③

引き続き、試薬マスターで指定した「在庫定数」を下回った試薬がある場合、

「自動注文対象試薬」画面が開きます。

注文を実施する場合、[注文実施]をクリックしてください。

※「自動注文」は試薬マスターの設定
「注文目安在庫数」「(内訳数)」と、
出庫後の「在庫数」で実行されます。

※今回、注文を見送った場合、
次回の出庫時に再度確認されます。
ただし、完全に在庫が無くなった場合
手動で注文する必要があります。

【補足】

「同時使用数」設定について

設定した個数の試薬を「使用中」とし、それを超えた試薬は自動的に「使用終了」とします。

※ 試薬マスター「ガイド・機器」タブの「同時使用数」にて設定します

例) 同時に同一の試薬を「4」個出庫する場合

出庫試薬一覧									
出庫日	管理ID	包装	使用	試薬名称	入庫日	使用期限	LotNo	使用開始	使用終了
未	100020	01	01	濃縮洗浄液3 オージン4280	2025/02/16	2027/02/16	1234		
未	100020	01	02	濃縮洗浄液3 オージン4280	2025/02/16	2027/02/16	1234		
未	100020	01	03	濃縮洗浄液3 オージン4280	2025/02/16	2027/02/16	1234		
未	100020	01	04	濃縮洗浄液3 オージン4280	2025/02/16	2027/02/16	1234		

同時使用数「1」設定の場合、使用終了「3」、使用中「1」

出庫試薬一覧									
出庫日	管理ID	包装	使用	試薬名称	入庫日	使用期限	LotNo	使用開始	使用終了
2025/02/16	100020	01	01	濃縮洗浄液3 オージン4280	2025/02/16	2027/02/16	1234	2025/02/16	2025/02/16
2025/02/16	100020	01	02	濃縮洗浄液3 オージン4280	2025/02/16	2027/02/16	1234	2025/02/16	2025/02/16
2025/02/16	100020	01	03	濃縮洗浄液3 オージン4280	2025/02/16	2027/02/16	1234	2025/02/16	2025/02/16
2025/02/16	100020	01	04	濃縮洗浄液3 オージン4280	2025/02/16	2027/02/16	1234	2025/02/16	

同時使用数「3」設定の場合、使用終了「1」、使用中「3」

出庫試薬一覧									
出庫日	管理ID	包装	使用	試薬名称	入庫日	使用期限	LotNo	使用開始	使用終了
2025/02/16	100020	01	01	濃縮洗浄液3 オージン4280	2025/02/16	2027/02/16	1234	2025/02/16	2025/02/16
2025/02/16	100020	01	02	濃縮洗浄液3 オージン4280	2025/02/16	2027/02/16	1234	2025/02/16	
2025/02/16	100020	01	03	濃縮洗浄液3 オージン4280	2025/02/16	2027/02/16	1234	2025/02/16	
2025/02/16	100020	01	04	濃縮洗浄液3 オージン4280	2025/02/16	2027/02/16	1234	2025/02/16	

出庫処理③

出庫取消

- ①出庫を取り消す場合、「出庫処理済み表示」のチェックを入れ、
該当試薬を出庫した「出庫日」に変更します。

- ②該当試薬の「出庫日」をクリックします。

出庫試薬一覧											
出庫日	管理ID	包装	使用	試薬名称	入庫日	使用期限	LotNo	使用開始	使用終了	残在庫	コメント
2025/01/21	103600	02	02	コレステストNキャリアレーター	2025/01/25	2027/01/25	124	2025/01/25		0	
2025/01/25	103230	01	01	ピリルビンキャリアレーター	2025/01/23	2027/01/25	1234	2025/01/25		0	
2025/01/25	104970	01		ルミバルスプレスト 洗浄液	2025/01/07	2027/01/25	123ABC	2025/01/25	2025/01/25	1	

- ③確認メッセージが表示されますので、[はい(Y)]をクリックします。

【補足】

出庫試薬一覧											
出庫日	管理ID	包装	使用	試薬名称	入庫日	使用期限	LotNo	使用開始	使用終了	残在庫	コメント
2025/01/25	103230	01	01	ピリルビンキャリアレーター	2025/01/23	2027/01/25	1234	2025/01/25		0	
2025/01/25	104970	01		ルミバルスプレスト 洗浄液	2025/01/07	2027/01/25	123ABC	2025/01/25	2025/01/25	1	

出庫処理が完了すると、出庫後の残り在庫が表示されます。

背景色が「黄色」 … 設定した「注文目安在庫数」未満となった場合

背景色が「ピンク色」 … 在庫が「0」の場合

出庫一覧画面

出庫した試薬の「使用開始(日)」、「使用終了(日)」、「使用状況(記録)」の編集を行います。

※「出庫日」「使用日」のいずれかを指定して検索します。

①該当試薬を選択して【使用情報編集】ボタンをクリックします。

※右スクロールで「出庫者」「使用者」を表示

②「使用終了」の「削除」チェックを外すと、日付が入力可能となりますので、

「使用終了」としたい日付を入力してください。

「使用状況」を指定する場合は、いずれかを選択してください。(任意)

上記を指定後、【編集完了】ボタンをクリックします。

- ・使用開始(日) … 変更のみ可能
- ・使用終了(日) … 変更、または削除が可能
- ・使用状況 … 通常使用以外で試薬を使用済みとした場合に該当理由を指定

【補足】

包装の内訳を個別に管理した場合の画面表示

出庫処理画面

- ・「使用」欄に内訳 No が表示されます。

※この場合、内訳「4」の内、1つ目を使用したことになります。

出庫試薬一覧										
出庫日	管理ID	包装	使用	試薬名称	入庫日	使用期限	LotNo	使用開始	使用終了	残在庫
2025/01/25	103230	01	01	ビリアルピシキアプレター	2025/01/23	2027/01/25	1234	2025/01/25		0
2025/01/25	104970	01		ルミバリスプレスト 洗浄液	2025/01/07	2027/01/25	123ABC	2025/01/25	2025/01/25	1

在庫管理画面

- ・在庫数と合わせて、内訳数が表示されます。

※ 在庫が「0」の場合でも、内訳が「3」残っている場合

在庫管理											
検索条件 試薬 (管理ID、バーコード読み) 名称 業者 部門 ガイド											
検索解除 ○ 在庫あり + 未納分 ● 在庫あり + 未納分 + 欠品 ● 欠品のみ											
管理ID	試薬名称	入庫日	使用期限	LotNo	入庫	在庫	内訳	未納	部門	規格容量	品番
100020	濃縮洗浄液3 オーション4280	2025/01/15	2025/01/31	124B	1	0	4		一般	1L*5	79053
100020	濃縮洗浄液3 オーション4280	2025/01/15	2025/02/28	125C	1	1	5		一般	1L*5	79053
102990	東洋pH濾紙(UNIV)				0	0		3	一般	20枚綴り*10...	7010120
103230	ビリアルピシキアプレター	2025/01/23	2027/01/25	1234	1	0	3		生化学	3mL用*4	412-73291
103310	補体価エントロル血清セット				0	0		10	生化学	1mL用*2*2種	410-43701

コメント編集

「試供品」など試薬毎にコメントを記録しておくことが可能です。

コメント編集

期間指定: 入庫日
 検索開始 2024年12月25日 (水) ▼
 検索終了 2025年 1月25日 (土) ▼

検索条件
 試薬 (管理ID、バーコード読み) 名称
 業者 --未指定-- 部門 --未指定-- ガイド --未指定-- 検索解除

No	管理ID	試薬名称	入庫日	使用期限	LotNo	規格容量	コメント
1	104970	ルシバリスアレスト 洗浄液	2025/01/07	2027/01/25	123ABC	4000mL×1	
2	104970	ルシバリスアレスト 洗浄液	2025/01/07	2027/01/25	123ABC	4000mL×1	
1	100020	濃縮洗浄液3 オーション4280	2025/01/15	2025/01/31	124B	1L*5	
2	100020	濃縮洗浄液3 オーション4280	2025/01/15	2025/02/28	125C	1L*5	
1	103230	ピリルビンキアプレター	2025/01/15	2027/01/15	1	3mL用×4	
1	103230	ピリルビンキアプレター	2025/01/23	2027/01/25	1234	3mL用×4	
2	103600	コレステスNキアプレター	2025/01/25	2027/01/25	124	2m用*3(30回)	

戻る (ESC) リスト出力 (F1) 先頭行から末行までコメント複写 コメント登録(F11) 印刷処理(F12)

コメント連続登録機能

「入庫日」及び「管理ID」で該当試薬を抽出した上で、先頭行にコメントを入力します。

「先頭行から末行までコメント複写」ボタンをクリックすると、全てにコメントが格納されます。

格納後、「コメント登録」をクリックして保存します。(個別編集も可能です。)

コメント編集

期間指定: 入庫日
 検索開始 2024年12月25日 (水) ▼
 検索終了 2025年 1月25日 (土) ▼

検索条件
 試薬 (管理ID、バーコード読み) 名称
 業者 --未指定-- 部門 --未指定-- ガイド --未指定-- 検索解除

No	管理ID	試薬名称	入庫日	使用期限	LotNo	規格容量	コメント
1	104970	ルシバリスアレスト 洗浄液	2025/01/07	2027/01/25	123ABC	4000mL×1	テスト
2	104970	ルシバリスアレスト 洗浄液	2025/01/07	2027/01/25	123ABC	4000mL×1	テスト
1	100020	濃縮洗浄液3 オーション4280	2025/01/15	2025/01/31	124B	1L*5	テスト
2	100020	濃縮洗浄液3 オーション4280	2025/01/15	2025/02/28	125C	1L*5	テスト
1	103230	ピリルビンキアプレター	2025/01/15	2027/01/15	1	3mL用×4	テスト
1	103230	ピリルビンキアプレター	2025/01/23	2027/01/25	1234	3mL用×4	テスト
2	103600	コレステスNキアプレター	2025/01/25	2027/01/25	124	2m用*3(30回)	テスト

戻る (ESC) リスト出力 (F1) 先頭行から末行までコメント複写 コメント登録(F11) 印刷処理(F12)

履歴・一覧・管理画面①

注文履歴

指定期間の試薬の注文履歴を照会・印字します。

注文履歴画面の検索条件と結果の例:

注文日	No	管理ID	試薬名称	発注数	納品日	コメント
2025/01/15	1	102990	東洋α666666(UNV)	3	2025/01/15	
2025/01/25	1	103010	補体価L40-α血濁セル	10	2025/01/25	
2025/01/25	2	103060	αスタザンキアレーター	1	2025/01/25	2025/01/25
2025/01/25	3	104040	α6-ラチン2000生研JRI/R2	5		
2025/01/25	4	104230	補体価-HA721700	5	2025/01/25	
2025/01/25	5	101730	CA グリーン1 CA6000	8		
2025/01/25	6	101920	αスタザン染色セル	1		
2025/01/25	7	101940	αスタザン染色液	4		

画面を右にスクロールすることで「注文者」を確認できます。

入庫一覧

指定期間の試薬の入庫履歴を照会・印刷します。

入庫一覧画面の検索条件と結果の例:

入庫日	No	管理ID	試薬名称	使用期限	LotNo	入庫数	規格容量	品番
2025/01/07	104970	αスタザン21700	洗浄液	2027/01/25	123ABC	2	4000mL×1	291139
2025/01/15	100020	濃縮洗浄液	αスタザン4280	2025/01/31	124B	1	1L×5	79053
2025/01/15	100020	濃縮洗浄液	αスタザン4280	2025/02/28	125C	1	1L×5	79053
2025/01/15	103230	αスタザンキアレーター		2027/01/15	1	1	3mL用×4	412-73291
2025/01/23	103230	αスタザンキアレーター		2027/01/25	1234	1	3mL用×4	412-73291
2025/01/25	103800	αスタザンキアレーター		2027/01/25	124	1	2mL用×3(30回)	289941

画面を右にスクロールすることで「入庫者」を確認できます。

在庫一覧

現時点の「入庫数」「在庫数」「残りの内訳」「未納数(注文済)」及び使用期限等を照会・印字します。

在庫一覧画面の検索条件と結果の例:

管理ID	試薬名称	入庫日	使用期限	LotNo	入庫数	在庫数	内訳	未納	品番
100020	濃縮洗浄液	2025/01/15	2025/01/31	124B	1	0	4		79053
100020	濃縮洗浄液	2025/01/15	2025/02/28	125C	1	1	5		79053
102990	東洋α666666(UNV)				0	0	3		7010120
103230	αスタザンキアレーター	2025/01/23	2027/01/25	1234	1	0	3		412-73291
103010	補体価L40-α血濁セル				0	0	10		410-43701
103060	αスタザンキアレーター	2025/01/25	2027/01/25	124	1	0	2		289941
104230	補体価-HA721700				0	0	5		418-85001
104970	αスタザン21700	2025/01/07	2027/01/25	123ABC	2	1			291139
106040	αスタザン21700	2024/11/18	2026/11/18	1	4	3			10067
116540	αスタザン21700	2024/11/18	2026/01/31	7U4A463	30	26			106849
123500	MALDI バイオマーカーマーカー				0	0	2		JP10378
123690	αスタザン21700	2024/11/13	2024/12/01	ABC1111	2	1	1		280586

履歴・一覧・管理画面②

棚卸処理

指定期間の入出庫及び現在の在庫を照会・印刷します。購入金額の集計も行います。

棚卸処理

照会条件: 入庫日 2024年12月25日 (水) 検索 試薬 (管理ID、バーコード等) 名称 検索条件

検索終了 2025年 1月25日 (土) 業者 未指定 部門 未指定 条件 未指定

管理ID	SSD	試薬名称	規格容量	品番	元在庫	入庫数	出庫数	現在在庫	業者	部門	購入数	在庫数
100020	0	濃縮洗浄液 オート/4280	1L*5	79053	0	2	1	1	(株)A/S	一般	27,000	13,500
100230	0	ビリアルンキアプレート	3mL用*4	412-73291	0	2	2	0	広興和光株	生化学	16,000	0
100600	0	ビスファスHキアプレート	2mL用*100	289941	0	1	1	0	(株)A/S	生化学	9,000	0
104970	0	ホルマリン洗浄液	4000mL*1	291139	0	2	1	1	初コンテナリ	免疫化学	128,000	64,000
100040	0	感熱記録紙 GA-1160 アダプスイン	58mm*25m	10067	3	0	0	3	(株)A/S	一般	0	7,500
116540	0	スプリット S-7UA オート/テラス	100枚	106949	26	0	0	26	(株)A/S	一般	0	169,000
123690	0	ホルマリン洗浄液 ITACT タカリ/ス 補体希釈	10mL	260596	1	0	0	1	初コンテナリ	免疫化学	0	10,000

戻る (ESC) リスト出力 (F1) 部門別印刷 (F10) 業者別印刷 (F11) 印刷処理 (F12)

使用期限管理

使用期限が切れた試薬、使用期限まで残日数が少なくなった試薬を検索します。

使用期限管理

照会条件: 使用期限 2024年12月25日 (水) 検索 試薬 (管理ID、バーコード等) 名称 検索条件

検索終了 2025年 2月25日 (火) 業者 未指定 部門 未指定 使用中対象

入庫日	管理ID	試薬名称	使用期限	状況	LotNo	在庫数	内訳	部門	規格容量	品番
2024/11/13	123690	ホルマリン洗浄液 ITACT タカリ/ス 補体希釈	2024/12/01	満期切れ	ABC1111	1		免疫化学	10mL	260596
2025/01/14	100310	補体希釈液 H-2血清希釈	2025/01/28	残り2週間	123	2	6	生化学	1mL用*20種	410-43701

戻る (ESC) リスト出力 (F1) 印刷処理 (F12)

「状況」凡例

使用期限切れ

残り 2 週間以内

LotNo 管理

指定期間内に入庫した試薬で、LotNo の変更がある試薬を検索します。

LotNo管理

照会条件: 入庫日 2024年12月25日 (水) 検索 試薬 (管理ID、バーコード等) 名称 検索条件

検索終了 2025年 1月25日 (土) 業者 未指定 部門 未指定 条件 未指定

管理ID	試薬名称	入庫日	使用期限	LotNo	入庫数	出庫数	在庫数	内訳	規格容量	品番
100020	濃縮洗浄液 オート/4280	2025/01/15	2025/02/28	125C	1	0	1	9	1L*5	79053
100020	濃縮洗浄液 オート/4280	2025/01/15	2025/01/31	124B	1	1	0	9	1L*5	79053
100230	ビリアルンキアプレート	2025/01/15	2027/01/15	1	1	1	0	15	3mL用*4	412-73291
100230	ビリアルンキアプレート	2025/01/23	2027/01/25	1234	1	1	0	15	3mL用*4	412-73291
100310	補体希釈液 H-2血清希釈	2025/01/14	2025/01/28	123	2	0	2	6	1mL用*20種	410-43701
100310	補体希釈液 H-2血清希釈	2025/01/14	2027/01/27	123	1	0	1	6	1mL用*20種	410-43701
100600	ビスファスHキアプレート	2025/01/25	2027/01/25	124	1	1	0	5	2mL用*100回	289941
104970	ホルマリン洗浄液	2025/01/07	2027/01/24	123ABC	1	1	0		4000mL*1	291139
104970	ホルマリン洗浄液	2025/01/07	2027/01/25	123ABC	1	0	1		4000mL*1	291139

戻る (ESC) リスト出力 (F1) 印刷処理 (F12)

注: 使用期限切れ、異なるLotNoがある試薬は「LotNo」の背景色が黄色になります。

同一試薬で、LotNoが異なる場合、
LotNo を黄色背景で表示します。

【補足】

入庫ミスした試薬について

出庫処理前であれば、入庫処理画面にて入庫自体を無かったことにできます。

①該当試薬を入庫した日に「入庫日」を変更します。

[illegible]

②「表示条件」にチェックを入れます。

入庫処理

入庫日

2024年11月 1日 (金)

入庫試験

表示条件

☒ 入庫登録済み表示

入庫試験一覧

発注済・未入庫

No	管理ID	試験名称	使用期限	LotNo	規格容量	業者	コメント
1	110800	ルミナルス BNP免疫反応カードリッジ	2025/05/31	1AX5054	14テスト X3	開業	
1	110820	ルミナルス FT4-N免疫反応カードリッジ	2025/02/28	EAX5023	14テスト X3	開業	
1	110880	ルミナルス TSH IFCC免疫反応カードリッジ	2025/06/30	K6B5064	14テスト X3	開業	
1	110890	ルミナルス洗浄液	2025/03/31	JJ5033	1000ML X1	開業	
2	110890	ルミナルス洗浄液	2025/03/31	JJ5033	1000ML X1	開業	
1	111190	オートアイト IGG血清(ウサギ)	2026/06/25	IG187D1	10 ML	開業	
1	111200	クームス コントロール	2024/11/26	K990	10 ML	開業	

③該当試薬の「No」欄をクリックして削除を行います。

入庫処理

入庫日 2024年11月 1日(金) ~ 入庫試験 [] (バコード読み)

-表示条件
☒ 入庫登録済み表示

入庫試験一覧 発注済・未入庫

No	管理ID	試薬名称	使用期限	LotNo	規格容量	業者	コメント
1	110800	ルミバルス BNP免疫反応カードリッジ	2025/05/31	1AX5054	14テスト X3	閉業	
1	110820	ルミバルス F14-N免疫反応カードリッジ	2025/02/28	EAX5023	14テスト X3	閉業	
1	110880	ルミバルス TSH IFCC免疫採取用処理					X
1	110890	ルミバルス洗浄液					
2	110890	ルミバルス洗浄液					
1	111190	オプテクト IGG血清(ウサギ)					
1	111200	クレス コントロール					
1	111350	ヒモスタシエル ファクターダイレクション					
2	111350	ヒモスタシエル ファクターダイレクション					
1	111370	ヒモスタシエル リスゾチーム					
1	111630	ルミバルス CK-MB免疫反応					
1	111740	シュタツフコ-NT-PROBNP					
1	120060	ジグナスオートALP IF(ELISA)					
1	120110	AUリエーゼン特異的 TC試薬					
1	120180	AUリエーゼン特異的 シグナル増強剤					
1	120820	MDI液					
1	122010	DxH ダイユール-エント	2026/02/28	2409108	10L	閉業(PRT)	
2	122010	DxH ダイユール-エント	2026/02/28	2409108	10L	閉業(PRT)	
3	122010	DxH ダイユール-エント	2026/02/28	2409108	10L	閉業(PRT)	
1	122450	Pウオッシュ	2025/09/30	BJ01	1組/2本(200mL)	閉業(PRT)	

No: 1 Pウオッシュを削除してよろしいですか。

はい(Y) いいえ(N)

(No)「未」は入庫未登録、削除は[No]押下でキャンセル
 使用期限、LotNoは、Shiftキーを押しながら該当セルをクリックすると修正可能

戻る(ESC) ラベル印刷(F10) 試験選択(F11) 入庫登録(F12)

【補足】

出庫済み試薬の廃棄方法

①「出庫一覧」画面を開きます。

※廃棄処理を行う試薬が画面上に表示されない場合、
その試薬を出庫した日まで「検索開始(日)」を変更します。

②該当試薬を選択(クリック)して、「使用情報編集」ボタンをクリックします。

出庫一覧

検索条件

検索開始: 2024年 8月 1日 (木) ▼

検索終了: 2024年11月 7日 (木) ▼

試薬: (管理ID、バーコード読み込み) 名称

業者: 未指定 分類: 未指定 機器: 未指定

検索解除

出庫日	管理ID	包装	使用	試薬名称	入庫日	使用期限	LotNo	使用開始	使用終了	出庫状態
2024/08/10	110560	05		ミュータカデオ NT-PROBNP-I50	2024/07/29	2025/03/31	DD7065	2024/08/10	2024/08/16	
2024/08/10	110800	03		ルシバリス BNP免疫反応カートリッジ	2024/07/29	2025/02/28	1AX5022	2024/08/10	2024/08/14	
2024/08/10	110890	01		ルシバリス TSH IFCC免疫反応カートリッジ	2024/08/07	2025/04/30	K8E5043	2024/08/10	2024/08/14	
2024/08/10	111700	01		ミュータカデオ トロポニンT	2024/07/26	2025/01/31	DB8056	2024/08/10	2024/08/31	
2024/08/10	122010	03		DxH ダイリュエーエント	2024/08/05	2025/11/27	2406109	2024/08/10	2024/08/16	
2024/08/11	110820	02		ルシバリス FT4-H免疫反応カートリッジ	2024/07/31	2024/12/31	EAX4122	2024/08/11	2024/08/19	
2024/08/11	110830	03		ルシバリス HBSAG-HO免疫反応カートリッジ	2024/07/29	2024/11/30	OQX4113	2024/08/11	2024/08/16	
2024/08/12	120090	01		AURジェント CRE試薬	2024/07/31	2025/07/31	661	2024/08/12	2024/08/27	
2024/08/12	120210	01		エスバ・Ca試薬(アルゼナゾIII)	2024/04/26	2025/09/30	23L11	2024/08/12		
2024/08/13	110680	01		感熱記録紙 58MMX25M	2024/07/23	2050/07/23	240430	2024/08/13	2024/08/26	
2024/08/13	110770	01	01	LPエントール・SARS-COV-2 AG	2024/08/02	2025/03/31	L5E5033	2024/08/13	2024/09/03	
2024/08/13	110770	01	02	LPエントール・SARS-COV-2 AG	2024/08/02	2025/03/31	L5E5033	2024/09/03	2024/09/24	
2024/08/13	111200	01		ケムス エントール	2024/07/26	2024/08/20	K968	2024/08/13	2024/08/20	
2024/08/13	111630	01		ルシバリス CK-MB免疫反応カートリッジ	2024/07/31	2025/02/28	6FX5021	2024/08/13	2024/08/19	
2024/08/13	122010	04		DxH ダイリュエーエント	2024/08/05	2025/11/27	2406109	2024/08/13	2024/08/17	
2024/08/13	122650	02		パウオッシュ	2024/07/31	2025/06/30	BG02	2024/08/13	2024/08/18	
2024/08/14	110560	06		ミュータカデオ NT-PROBNP-I50	2024/07/29	2025/03/31	DD7065	2024/08/14	2024/08/19	
2024/08/14	110600	03		ミュータカデオ I50用チップカセット	2024/08/02	2026/01/31	AF602	2024/08/14	2024/08/16	
2024/08/14	110800	04		ルシバリス BNP免疫反応カートリッジ	2024/07/29	2025/02/28	1AX5022	2024/08/14	2024/08/16	

戻る(ESC) リスト出力(F1) 使用情報編集(F11) 印刷処理(F12)

③「使用終了」の「削除」チェックを外すと、日付が入力可能となりますので、「使用終了」としたい日付を入力してください。

出庫一覧

検索条件

検索開始: 2024年 8月 1日 (木) ▼

検索終了: 2024年11月 7日 (木) ▼

試薬: (管理ID、バーコード読み込み) 名称

業者: 未指定 分類: 未指定 機器: 未指定

検索解除

使用情報編集

管理番号: 202404261202100101

試薬名: エスバ・Ca試薬(アルゼナゾIII)

LotNo: 23L11

使用開始: 2024/08/12

使用終了: ☐ 削除

キャンセル 編集完了

戻る(ESC) リスト出力(F1) 使用情報編集(F11) 印刷処理(F12)

【補足】

出庫済み試薬の廃棄方法（続き）

④「使用状況」を指定する場合は、いずれかを選択してください。（任意）

「編集完了」ボタンをクリックすると、該当試薬は「使用終了(完了)」となります。

The screenshot shows the 'Inventory List' window with a table of reagents. The 'Usage Status' (使用状況) dropdown is highlighted with a red circle, showing options: ☒ 正常終了, ☐ 期限切れ, ☐ 劣化, ☐ 破損. The 'Edit Complete' (編集完了) button is also highlighted with a red circle.

操作担当者名表示

「注文履歴」「入庫一覧」「出庫一覧」画面の一覧を右にスライドすると、各試薬の処理担当者を利用者マスターに登録した「利用人名」で表示します。

※「利用者 ID」を「使用人名」に変換して表示します。

The left screenshot shows the 'Order History' window with a table of orders. The 'Operator Name' (操作担当者名) column is highlighted with a red circle. The right screenshot shows the 'Inventory List' window with a table of reagents. The 'Operator Name' (操作担当者名) column is also highlighted with a red circle.

※ 各操作時に要求される「操作担当者記録」に名札裏のバーコードを読み込ませてください。
利用者マスターに登録されている方は、「利用人名」にて表示します。

【補足】

2 台の分析装置で同一の試薬を使用する場合

試薬マスターの「ガイド・機器」タブの「機器指定」にチェックを入れて保存してください。

管理ID	SEQ	試薬名称	品番	規格容量
118010	0	リチウム標準液	10-190	10mL*3
118020	0	リチウムコントロール液セット	10-188	2濃度 各10mL
119480	0	ケトン体コントロールセット	464-85101	2mL*2*2種
120140	0	ルシカGA-L2/ALB R-1	547454	40mL*2
120150	0	ルシカGA-L2/ALB R-2	547461	20mL*2
120160	0	ルシカGA-L2/GA R-1	547416	40mL*2
120170	0	ルシカGA-L2/GA R-2	547423	10mL*2
120180	0	ナリビアTDMハンコマイン	487347	15mL/15mL

「機器指定」にチェックを入れた試薬を出庫した際は、どちらの機器で使用するか確認メッセージが表示されます。

試薬名: アクアオート カイノス TP-II 試薬 反応試液 (I)

上記試薬は、使用する号機を指定してください。

1号機使用 2号機使用 指定なし

「出庫一覧」画面で、どちらの機器として使用したか確認できます。

出庫日	管理ID	包装	使用	試薬名称	入庫日	使用期限	LotNo	使用開始	使用終了	出庫状態
2024/11/09	120270	01		アクアオート カイノス TP-II 試薬 反応試液 (I)	2024/11/09	2026/11/09	1	2024/11/09		1号機使用

【補足】

入庫一覧・出庫一覧 承認処理①

※承認処理を実施する利用者は「承認可」権限が必須となります。

①出庫一覧画面(また入庫一覧画面)を開き、承認操作を実施する試薬を表示(抽出※)します。

※「検索開始日」「検索終了日」「部門」等を指定して抽出します。

②「出庫承認」(または「入庫承認」)ボタンをクリックします。

確認メッセージが表示されますので、「はい(Y)」をクリックします。


③承認操作を行う利用者の権限を確認しますので、「利用者 ID」を入力(またはバーコード読込)します。

※利用者 ID が未登録、承認権限が無い場合、承認処理を実施せず終了します。

【補足】

入庫一覧・出庫一覧 承認処理②

④確認メッセージが表示されます。

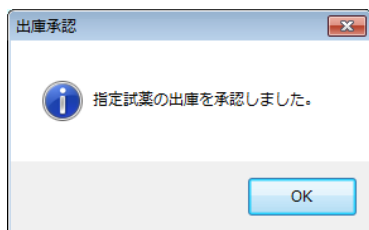

⑤承認後の内容が表示されます。（「承認情報」の確認は右にスクロールしてください）



出庫日	管理ID	包装	使用	試薬名称	使用終了	出庫状態	部門	出庫者	承認情報
2025/01/13	103230	01	01	ビリアルビンキアプレーター	13	2025/01/15	生化学	テスト	2025/02/05 認証職員
2025/01/13	103230	01	02	ビリアルビンキアプレーター	15	2025/01/20	生化学	テスト	2025/02/05 認証職員
2025/01/13	103230	01	03	ビリアルビンキアプレーター	15	2025/01/25	生化学	テスト	2025/02/05 認証職員
2025/01/13	103230	01	04	ビリアルビンキアプレーター	20		生化学	テスト	2025/02/05 認証職員
2025/01/21	103600	02	01	コレステロールキアプレーター	21	2025/01/25	生化学	テスト	2025/02/05 認証職員
2025/01/25	103230	01	01	ビリアルビンキアプレーター	25		生化学	テスト	2025/02/05 認証職員

【注意事項】

- ・ 承認を取り消ししない限り、再承認はされません。
- ・ 承認済み試薬しか表示(抽出)されていない場合、承認処理は実施されません。
- ・ 承認を取り消しする場合、Shift キーを押しながら、「出庫承認」（または「入庫承認」）ボタンをクリックします。後の操作は承認処理と同じです。
なお、操作ログ上には取り消し処理を行った記録は残ります。

【補足】

調整試薬管理について

①試薬マスター画面

「調整後期限」を「0」以外とした試薬は、以降の「調整試薬」と扱われます。

※「調整」… 溶解、混合などの操作

(印刷用)

商品・注文情報 バーコード管理 **ガイド・機器** 登録情報 抽出処理 拡張

ガイド Alinity試薬&消耗品

機器指定 ☐ (使用時に1号機、2号機を要指定)

同時使用数 1 (0:通常/平行使用選択可、1~9:同時使用数)

調整後期限 7 (0:対象外、1~99:調整後の使用期限日数)

②出庫処理画面

「調整試薬」とした試薬は、出庫時に以下のような「調整ラベル」が印刷されます。(1枚ずつ)

※「調整後使用期限」… 調整日(出庫日)に、「調整後期限」を加算した日付

105141 包装 1(4) 入20250201
ACCURUN810陰性コントロール
Lot 1234
調整日 2025/02/03
調整後使用期限
25/02/10

118640 包装 1(1) 入20241111
Alinity CEA-カリブレーション
Lot 61052FZ00
調整日 2025/02/26
調整後使用期限
25/03/05

【補足】

再印刷する場合は、以下の操作を行います。

- ① 該当試薬を出庫した「出庫日」を指定
- ② 「出庫処理済み表示」にチェック
- ③ 該当試薬を選択
- ④ 「調整ラベル印刷」ボタンをクリック

【注意】「調整日」ではなく「出庫日」

戻る(ESC) (出庫日「未」は出庫未処理、削除は[出庫日]欄をクリック)

調整ラベル印刷 出庫処理(F12)

【補足】

調整試薬管理について②

③試薬管理システムメニュー

「調整試薬」は「調整試薬管理」画面で、使用状況を確認できます。



初期画面では、「使用中」の「調整試薬」が表示されます。

なお、「使用中」の「調整試薬」の「調整後使用期限」が切れた場合は、背景がピンクとなります。

The screenshot shows the '調整試薬管理' screen with search filters and a table of reagents. The '調整後使用期限' for the first row is circled in red.

出庫日	管理ID	包装	使用	試薬名称	入庫日	LotNo	調整日	調整後使用期限	使用終了	部門
2025/02/03	105141	01	04	ACCURUN810陰性コントロール	2025/02/01	1234	2025/02/19	2025/02/26		免疫化学
2025/02/26	118640	01		Alinity CEA*キャリアレータ	2024/11/11	61052FZ00	2025/02/26	2025/03/05		免疫化学

「使用済含む」のチェックを入れると、検索期間の「調整試薬」が表示されます。

The screenshot shows the '調整試薬管理' screen with the '使用済含む' checkbox checked. The table now includes reagents with expired dates, which are highlighted in pink.

出庫日	管理ID	包装	使用	試薬名称	入庫日	LotNo	調整日	調整後使用期限	使用終了	部門
2025/02/03	105141	01	01	ACCURUN810陰性コントロール	2025/02/01	1234	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/03	免疫化学
2025/02/03	105141	01	02	ACCURUN810陰性コントロール	2025/02/01	1234	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/11	免疫化学
2025/02/03	105141	01	03	ACCURUN810陰性コントロール	2025/02/01	1234	2025/02/11	2025/02/18	2025/02/19	免疫化学
2025/02/03	105141	01	04	ACCURUN810陰性コントロール	2025/02/01	1234	2025/02/19	2025/02/26		免疫化学
2025/02/26	118640	01		Alinity CEA*キャリアレータ	2024/11/11	61052FZ00	2025/02/26	2025/03/05		免疫化学

【補足】

使用量管理について

2画面構成で1画面目は「対象試薬一覧」となります。

この画面で対象試薬を選択するか、該当試薬のバーコード、または管理ラベルの読み込みから次の「使用管理画面」に移動します。

管理ID	試薬名称	メーカー	規格容量	品番	部門	ガイド	業者
101390	塩酸 特級	富士フイルム和光純薬	500ml	080-01066	毒劇物解析	検査試薬	広島和光(株)岡...
123750	メタノール 特級 3L	キシダ化学	3000ml	000-48663	血液・凝固	検査試薬	カワニライフサイエ...

使用管理画面では、該当試薬の「出庫・使用状況」上段と「使用量管理(使用状況)」下段が表示されます。使用量管理では、「受入量(入庫)」「使用量」の他、「棚卸・承認」操作による監査も記録されます。

管理ID	包装	使用	試薬名称	入庫日	使用期限	LotNo	出庫日	使用開始	使用終了	出庫状態
101390	01		塩酸 特級	2025/05/01	2027/06/09	0501	2025/05/02	2025/05/02	2025/06/09	
101390	01		塩酸 特級	2025/05/26	2027/06/09	0526	2025/06/09	2025/06/09		

処理年月日	処理内容	受入量	使用量	容器残量	総在庫量	使用者	承認情報	コメント
2025/05/01	入庫	500	0	0	500	s	2025/06/09 承認者	
2025/05/05	使用	0	100	400	400	使用者	2025/06/09 承認者	
2025/05/12	使用	0	120	280	280	使用者	2025/06/09 承認者	
2025/05/19	使用	0	200	80	80	使用者	2025/06/09 承認者	
2025/05/26	入庫	500	0	0	580	s	2025/06/09 承認者	
2025/05/26	使用	0	80	0	500	使用者	2025/06/09 承認者	
2025/05/26	使用	0	110	390	390	使用者	2025/06/09 承認者	
2025/06/02	棚卸	0	0	0	390	承認者	2025/06/09 承認者	棚卸
2025/06/02	使用	0	125	265	265	使用者		

なお、「使用量」の情報登録は不可逆で、一旦登録すると利用者は削除・変更はできません。

訂正する場合は、マイナス値の「使用量」と「コメント」欄にその理由を登録するようになります。